

Sibelmed[®]

+40
años
years



Gran aislamiento
acústico de 41 dB



Montaje rápido y
sencillo



Compatible con los
principales audiómetros
del mercado



Mesa abatible

S-BASIC

CABINA AUDIOMÉTRICA

CE Clase I

www.sibelmed.com

S-BASIC · cabina audiométrica

Descripción

La cabina insonorizada S-BASIC utiliza los más novedosos materiales en aislamiento acústico. Ello ha permitido elaborar una gama de cabinas de gran calidad a un precio muy económico, reduciendo su peso y obteniendo un elevado índice de aislamiento con una gran funcionalidad y belleza estética, además de su compatibilidad con los principales audiómetros del mercado. Su acabado exterior es de paneles lavables, su interior de aspecto elegante y confortable. Dispone de iluminación interna.

Características

	S-BASIC	S-BASIC B	S-BASIC C
Medidas externas	96x96x208 cm	110x110x208 cm	120x120x208 cm
Medidas internas	86x86x190 cm	101x101x193 cm	111x111x193 cm
Ventana		70 x 58 cm	
Puerta		80 x 188 cm	
Mesa abatible		80 x 40 cm	
Material externo		Melamina	
Material interno		Espuma piramide	
Iluminación int.		Lámpara LED circular	
Suelo		Poliéster lavable	
Alimentación	220 V 50/60 Hz (Otros voltajes opcionales)		
Placa conexiones	5 jacks de Ø 6,3mm y 1 jack de Ø 3,5mm		
Peso	<200 Kg	<220 Kg	<240 Kg

Normativas


• Acorde con las Normativas:

EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, EN 60601-1-6:2010+A1:2015, EN 62366:2008+A1:2015, EN ISO 14971:2019, EN 1041:2008+A1:2013, EN ISO 15223-1:2016.

Este producto ha sido validado en laboratorio según norma EN ISO 11957:2009, cálculo del índice global de reducción acústica ponderado, se ha realizado según norma UNE EN ISO 717-1:1997.

El proceso de diseño, producción y servicio postventa está efectuado de acuerdo con el estándar de calidad ISO 9001:2015, EN 13485:2016+AC:2018 y con los requisitos del Reglamento de productos sanitarios (UE) 2017/745.


Aislamiento acústico

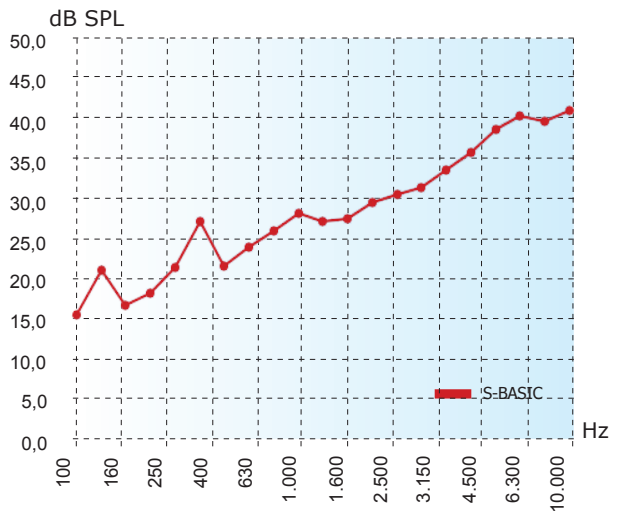

Ensayo certificado por laboratorio acreditado Applus.

AUDIÓMETRO DE 2 CANALES

- Pantalla táctil a color.
- Pórtatil, con bolsa de transporte.
- 2 modelos: A-AOM.
- Base de datos: >1000 pruebas con pacientes ilimitados.
- Audiometría automática Hughson-Westlake.
- Exportación de datos (vía Ethernet).
- Conectividad USB y Ethernet.
- Software de audiometría W50.

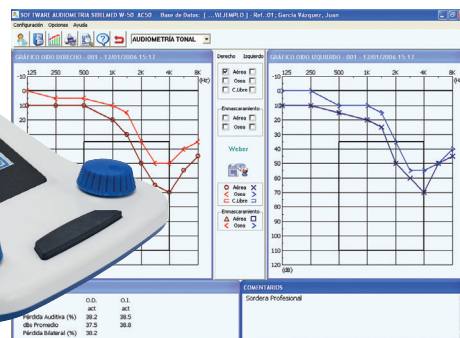

CE



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0910070065

EN ISO9001:2015