

INNOVA-INNOVA PLUS

PESA PERSONAS ELECTRÓNICA

Certificada **CE** **M16** 0120

Robusta, fiable y precisa

Gran visor de fácil manejo y tecla IMC


Puerto USB

Indicador del estado de la batería

Patas niveladoras

Económica

Tallímetro incorporado (Innova Plus)

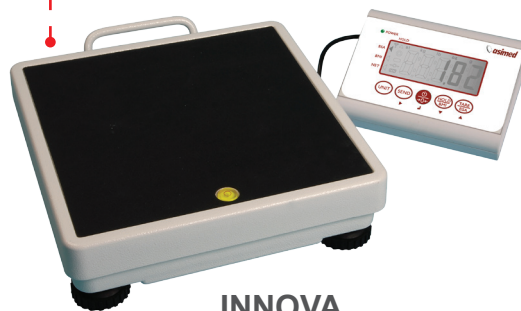

INNOVA



INNOVA PLUS

Pesa Personas electrónica.

Báscula electrónica pesa personas válida para el pesaje en hospitales, clínicas, centros deportivos, etc... Ideal para sectores sujetos a la directiva europea 90/384/CEE de equipos certificados.

Construcción en aluminio fundido de primera calidad, sólida y ligera. Dispone de pantalla LCD de alto brillo y contraste con iluminación de fondo y dígitos de 20 mm. de altura para facilitar la lectura.

Nuevo visor orientable con un acceso más fácil a cada una de las funciones. Permite al usuario inclinar el visor a su gusto, por simple comodidad o para facilitar la lectura.

Manejo sencillo: Cada función tiene su indicador en pantalla para que el usuario sepa qué funciones tiene activadas en cada momento.

La báscula Innova/Innova Plus dispone de las siguientes teclas de función:

- Unit:
- Send:
- On/Cero/Off
- Fijación del peso (Hold)/BMI: Ideal para ofrecer resultados exactos y fiables. Proporciona directamente el valor del Índice de Masa Corporal (IMC).
- Tara: Capaz de tarar el 100% de su máxima capacidad.

Incorpora la función de auto-apagado para evitar un consumo innecesario de energía.

Su base dispone de plataforma antideslizante e incorpora cinco pies reguladores que, junto al nivel situado en la base, ayudarán a nivelar la báscula en caso de estar situada sobre una superficie irregular.

Posibilidad de transmitir información de la báscula al ordenador a través del puerto USB, si el centro dispone de un software para esta función.

Cuenta con unas ruedas para facilitar el traslado interno del equipo (sólo en Innova Plus).

Ficha Técnica

Max	250 kg.
e	100 g.
Min	0 kg.
Medidas plataforma	310x90x310 mm.
Medidas equipo	1160 x 480 x 310 mm.
Peso del equipo	7,9 kg.
Batería	6xAA.
Alimentación:	
6 Pilas AA de 1,5V. o adaptador red 1A de 12V (suministrado con la báscula).	
Resolución pantalla	1/3000
Temp. de funcionamiento	0°-40°

Tallímetro T60:

Max.:	200 cm.
Min.:	60 cm.
e.:	0,1 cm.

